

Matbox - ref.: MBX + wybrany kolor

Silikonowy pojemnik do ochrony narzędzi chirurgicznych

Firma AREX® zaprojektowała jednoczęściowy, zintegrowany z matą, pojemnik do przechowywania, transportu i sterylizacji delikatnych narzędzi.



Dane techniczne

Elastomer silikonowy utwardzony płytą
Twardość silikonu: 70 w skali Shore'a
Elastomer silikonowy zgodny z USP VI oraz
ISO 10993
Środek barwiący: < 1% (zatwierdzony przez FDA)
Wymiary użytkowe: 195 x 195 x 20 mm
Wymiary zewnętrzne: 205 x 205 x 28 mm

Dostępny w szerokiej gamie kolorów



Ref.: MBX, po którym następują dwie litery określające kod koloru


Design+photo: e-monecaux.fr / Réf. 207 61.04 - © AREX® - 2019

Matbox

Efekt konfiguracji silikonowych kolców


Spód pojemnika Matbox

Rzędy giętkich kolców silikonowych, usytuowane naprzeciw otworów bocznych, zapobiegają wysuwaniu się końcówek narzędzi z pojemnika.

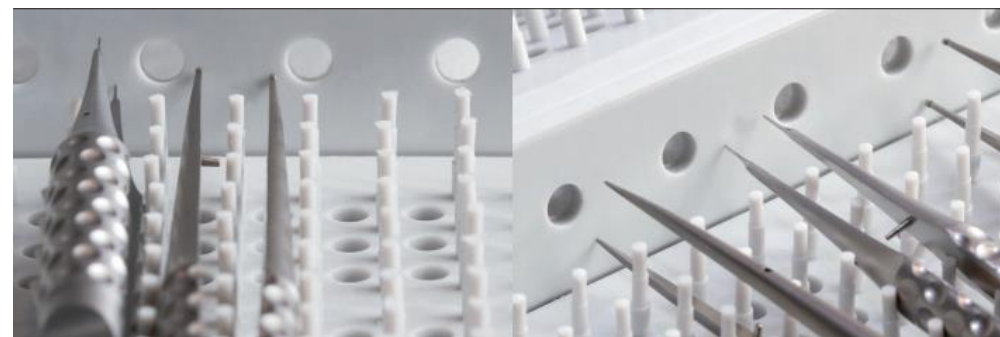

Pokrywa pojemnika Matbox


Rzędy giętkich kolców silikonowych rozmieszczonych naprzemiennie z kolcami na spodzie pojemnika, delikatnie przytrzymują instrumenty.

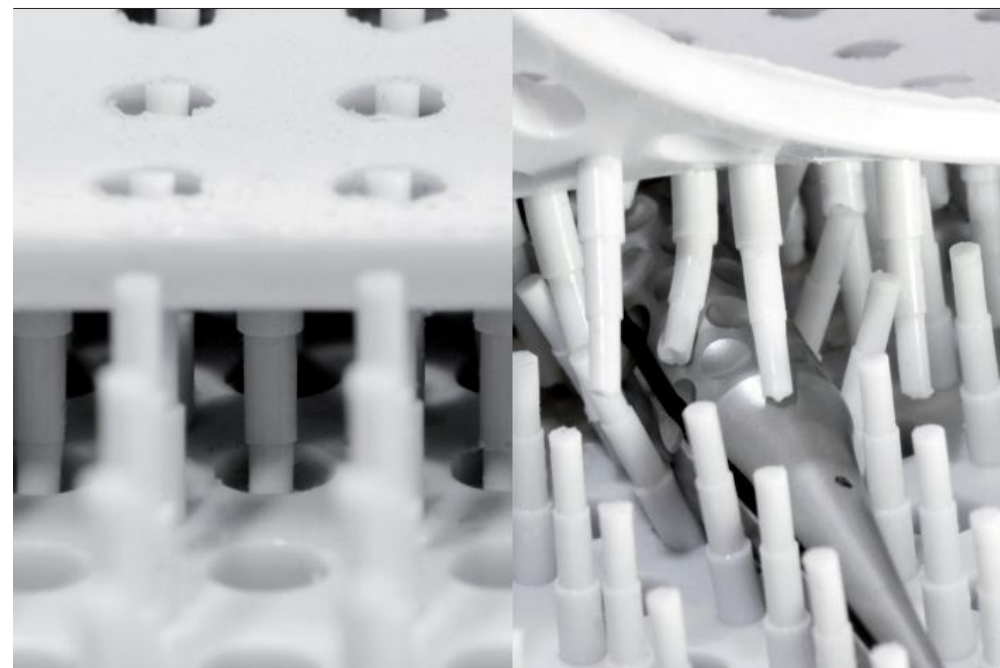

Matbox II - ref.: MBXII + wybrany kolor

Silikonowy pojemnik do ochrony narzędzi chirurgicznych

Firma AREX® zaprojektowała jednoczęściowy, zintegrowany z matą, pojemnik do przechowywania, transportu i sterylizacji delikatnych narzędzi.

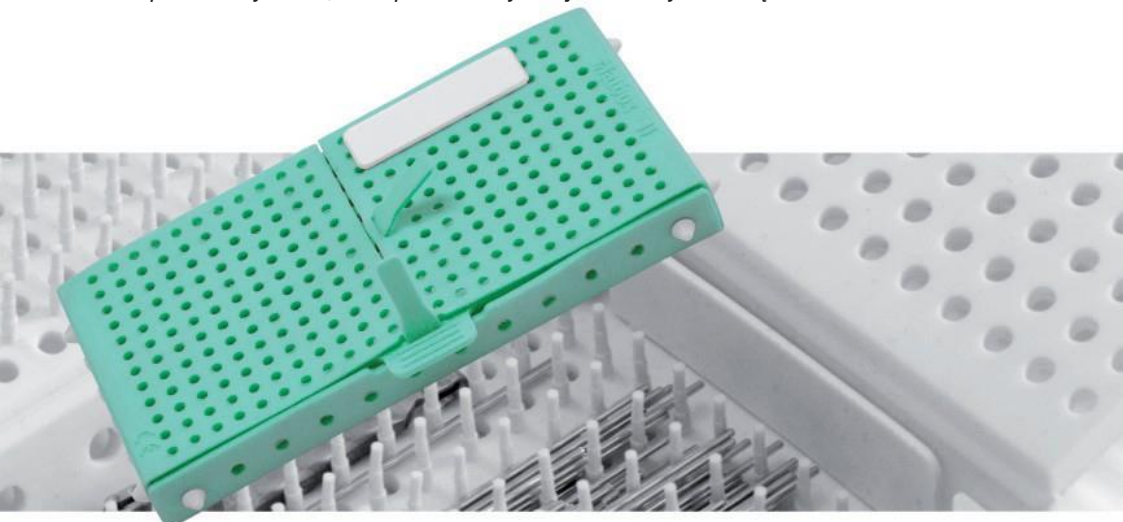

Dane techniczne


Elastomer silikonowy utwardzany płytą
Twardość silikonu: 70 w skali Shore'a
Elastomer silikonowy zgodny z USP VI oraz
ISO 10993
Środek barwiący: < 1% (zatwierdzony przez FDA)
Wymiary użytkowe: 100x195x20 mm
Wymiary zewnętrzne: 115x215x28 mm

Dostępny w szerokiej gamie kolorów



ref.: BN JA OR RO RF GR VT VA NO BL

Ref.: MBX, po którym następują dwie litery określające kod koloru

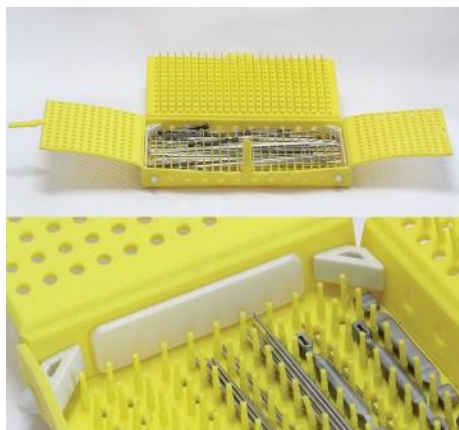


Matbox II

Efekt konfiguracji silikonowych kolców

Spód pojemnika Matbox

Rzędy giętkich kolców silikonowych, usytuowane naprzeciw otworów bocznych, zapobiegają wysuwaniu się końcówek narzędzi z pojemnika.

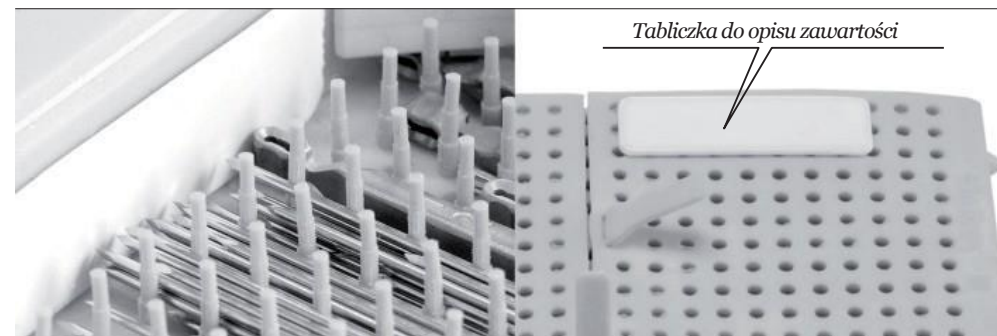

Tabliczka do opisu zawartości

Pokrywa pojemnika Matbox

Rzędy giętkich kolców silikonowych rozmieszczonych naprzemiennie z kolcami na spodzie pojemnika, delikatnie przytrzymują instrumenty.

